

カテーテルの保管場所から血管造影室まで、カテーテルを吊るした状態で移動しやすいカート。手前に伸ばせる取り出しやすいフックで、24 種類・最長 1350mm のカテーテルを保管できます。

フック
レールを手前に引き出す
ことができます。



キャスター

ストッパー付キャスター




血管造影室におけるカテーテル収納例

SP カテーテルカート 6 列

材質：スチール

キャスター：φ 100 (4 輪自在) 前側 2 輪ストッパー付

Item No. Price (JPY) / ea. 均等耐荷重：12kg
MCR439 ¥120,000 (各フック 500g)

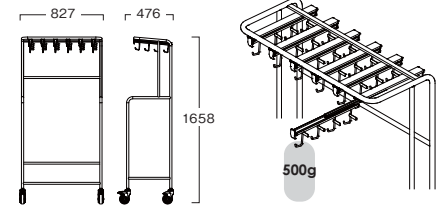

手前に伸ばすことのできるスライド式のフックなので、奥にあるカテーテルも探しやすく、取り出しやすくなっています。



フックの上にはネームプレートがあり、カテーテルの品名等をシールに貼ることができます。



フックレールにはマグネットキャッチがついており、さらにレールが傾斜しているため、走行中にフックレールが飛び出しにくい設計です。

河渾株式会社 メディカル事業部

●取扱営業所

東京店	〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-15-1	TEL.03 (3669) 8611	FAX.03 (3669) 8612
札幌店	〒060-0003 札幌市中央区北三条西1-1-11	TEL.011 (219) 1961	FAX.011 (219) 1964
盛岡店	〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通3-53	TEL.019 (653) 7011	FAX.019 (653) 7411
仙台店	〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1	TEL.022 (262) 9161	FAX.022 (262) 9166
名古屋店	〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-19-12	TEL.052 (953) 1801	FAX.052 (953) 1805
大阪店	〒530-6020 大阪市北区天満橋1-8-30	TEL.06 (7222) 8246	FAX.06 (6355) 0136
広島店	〒730-0004 広島市中区東白島町14-15	TEL.082 (511) 8411	FAX.082 (511) 8412
福岡店	〒810-0001 福岡市中央区天神3-9-25	TEL.092 (737) 8471	FAX.092 (737) 8473



製品の詳細などは、
Web カタログや動画サイトでご覧頂けます。
<https://me.kawajun.jp/>